

# PROGNOSYS FÖR PHOSPHAX sc

## Eliminera akuta sista minuten-underhåll.

PROGNOSYS är ett prediktivt diagnostiksystem som gör att du kan vara proaktiv med ditt underhåll genom att det varnar dig om kommande instrumentproblem. Du vet med säkerhet om förändringar i dina mätningar beror på förändringar i ditt instrument eller ditt vatten.



### Mätvärdesindikator

Mätvärdesindikatorn övervakar instrumentets komponenter och använder informationen för att varna användaren om kommande instrumentbehov innan mätningarna blir opålitliga.



### Serviceindikator

Serviceindikatorn övervakar antalet dagar tills instrumentet behöver underhåll eller service.

Tid att planera ditt underhåll *innan* dina mätningar påverkas.

### UNDERHÅLL KRÄVS



#### Mätvärdesindikator


Extremt låga reagensnivåer  
Instrumentfel



#### Serviceindikator

1 dag eller mindre återstår till nästa rekommenderade underhåll  
Vatten i analysatorn

### UNDERHÅLL INOM KORT

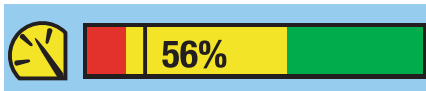

#### Mätvärdesindikator

Låga reagensnivåer, behöver bytas snart  
Byte av pumpkolv försenat med mer än 60 dagar  
Filtermodulen är smutsig, rengöring behövs snart (gäller bara analysatorer med filterenhet)  
Instrumentvarning



#### Serviceindikator

2–14 dagar återstår till nästa underhålls-uppgift (kan ställas in av användaren)

### UNDERHÅLLSPRESTANDA



#### Mätvärdesindikator

Reagentnivåer acceptabla (1 % eller mer återstår)  
Pumpkolen är i gott skick (100 %) eller byte av pumpkolen är försenat (76–99 %)  
Filterenheten i gott skick  
95 % medan analysatorn värmer upp  
95 % medan analysatorn kyler ned



#### Serviceindikator

7–14 dagar återstår till nästa underhålls-uppgift (kan ställas in av användaren)  
Lite eller ingen fukt upptäckt i analysatorn

Många av de parametrar och uppgifter som underhållsindikatorn tar hänsyn till visas också genom service-indikator om de relaterade instrumentkomponenterna kräver underhåll snart.